

Lago Hospital

16514 Patul de spital Lago este o simbioză perfectă între siguranță și confort. Poziția joasă a patului de ± 25 cm reduce considerabil riscul de cădere din pat, în timp ce înălțimea de lucru ergonomică de ± 80 cm garantează o îngrijire eficientă.

Cadrul inferior

- Ajustare stabilă a înălțimii prin intermediul brațelor de susținere.
- Ajustare Trendelenburg (invers) până la $\pm 17^\circ$.
- Roți Integral S Ø 100 mm cu frână centrală.
- Bară de frână cromată, proiectată ergonomic, pentru a activa mecanismul central de frânare.
- Bara de frână accesibilă în toate pozițiile patului.
- Garda la sol suficientă pentru a permite utilizarea unui elevator pentru pacient.
- Patul poate fi deplasat în fiecare poziție, cu excepția poziției de siguranță (= poziția cea mai joasă).

Platforma saltea

- Platformă pentru saltea cu 4 secțiuni.
- Spătarul este ajustabil electric până la $\pm 70^\circ$ cu autoregresie.
- Siguranța telescopică la spătar previne blocarea pacientului în timpul unei înclinări.
- Spătarul este echipat cu un indicator de înclinare.
- Secțiunea genunchi este ajustabilă electric până la $\pm 34^\circ$ (la versiunea cu 4 secțiuni).
- Secțiunea gâmbelor/picioare este ajustabilă manual.
- Manipulările electrice ale secțiunilor platformei saltea sunt echipate cu o clemă de siguranță pentru a preveni blocarea pacientului.
- Eliberare rapidă manuală a spătarului.
- Platformă saltea cu profile rotunjite de oțel.
- Prevăzută cu orificii pentru curele de imobilizare.
- Spătarul și secțiunea picioare sunt echipate cu 2 suporturi integrate pentru saltea.
- Extensie telescopică a patului de până la +20 cm.
- Cele 4 colțuri ale patului sunt echipate cu bumpere de protecție integrate.
- Cele 4 colțuri ale patului sunt echipate cu suporturi de fixare stativ de perfuzii sau stâlp de ridicare.
- Barele laterale de pe ambele părți sunt echipate cu 3 cârlige sintetice pentru accesorii.


Funcțiile electrice

- Funcțiile electrice sunt activate prin intermediul telecomenzii sau a (mini-)panoului de comandă (*).
- Următoarele funcții sunt posibile prin intermediul unor combinații de taste de pe telecomandă:
 - Trendelenburg
 - Blocare / deblocare totală (după 3 sec.)
 - CPR
 - Înălțime de transport ajustabilă personal
- Telecomanda este echipată cu o funcție de dormit preprogramată și buton pentru lumina de sub pat (*).
- (Mini-)panoul de comandă asistentă (*) permite blocarea selectivă a mai multor funcții electrice.
- Telecomanda opțională (*) permite blocarea selectivă a mai multor funcții printr-o cheie magnetică.
- Panoul de blocare (*) blochează toate funcțiile electrice ale telecomenzii printr-un singur buton.



Dimensiuni și date tehnice

- Lățime: 100 cm, Lungime: 212 cm
- Variația înălțimii platformei saltea: ± 25 cm - ± 80 cm
- Sarcina de lucru sigură: 250 kg
- Dimensiuni platformă saltea: 204 x 86 cm
- Dimensiuni saltea: 195 x 85 cm, grosime: 12 - 15 cm
- Consum în stand-by: 0,5 W (max. 4,38 kWh / an)

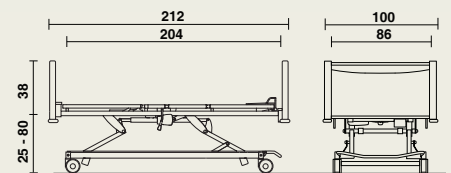

Materiale și finisaje

- Metal.
- Laminat solid.
- Vopsea epoxidică RAL 9006 aluminiu alb sau cromat.
- Puncte de articulație cu rulmenți sintetici (= nu necesită întreținere).
- Rezistență la produsele de curățare obișnuite.

Pentru informații suplimentare despre **materiale** și **construcție**: consultați documentele disponibile.

Referință la gama noastră extinsă de **culori**.

Opționale

- Platformă saltea cu secțiuni detașabile din laminat solid, grosime 6 mm.
- Extensie platformă saltea până la +20 cm.
- Distanțier de perete.
- Eliberare rapidă electromecanică (CPR).
- Suport pătură.
- Lumina de noapte sub pat (3 LED-uri).
- Baterie (plumb acid sau Li-ion).
- Lampă de citit.
- Pedala de ajustare a înălțimii (sus/jos).
- Roți duble Linea Ø 125 mm cu frână centrală.
- Roți duble Linea Ø 150 mm cu frână centrală.
- Alarmă de frână.
- A 5-a roată (numai cu roți Ø 125 sau 150 mm).
- Protecție electrică Clasa I.

Tipuri de panouri

- Jaro

Protecții laterale

- Trix (*)
- Twin (*)
- Atmosphere (*)

Accesorii

Referință la lista de accesorii.

(*) Opțional

